



Overlander: La Máxima Movilidad Todoterreno

La libertad de explorar terrenos hasta ahora inalcanzables es de un valor incalculable.

Para las personas con movilidad reducida, Overlander ofrece la oportunidad de aventurarse donde ninguna otra silla de ruedas ha estado antes.

Ya sea para senderismo, trekking, pesca o agricultura, Overlander tiene la fuerza y la estabilidad para hacer frente a casi cualquier terreno con facilidad. Descubre cómo esta innovadora silla de ruedas todoterreno está cambiando vidas y abriendo nuevas posibilidades para la exploración y la independencia.

Modelos Overlander: 4Zx , Flatlander y Mini OffRoad

Overlander 4Zx

Soporta usuarios de hasta 190 kg. Cuenta con motores más potentes y puede manejar pendientes de hasta 35°. Ideal para quienes buscan el máximo rendimiento todoterreno.




Flatlander

Con sus llantas sustanciales, potente motor y sistema de tracción en dos ruedas, los molestos bordillos y pavimentos no son rival para el Flatlander.



Overlander Mini

reúne todas las capacidades robustas del Overlander 4ZX en un diseño más compacto. Perfecto para aventureros a partir de 7 años, enfrenta sin esfuerzo el barro, la nieve y la arena, ofreciendo una experiencia al aire libre sin precedentes.

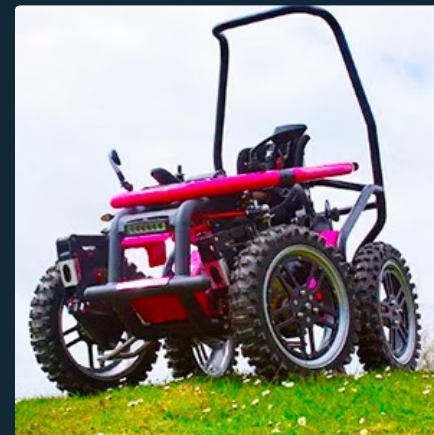

Características Comunes

Todos los modelos incluyen baterías de litio de 24v 45 Ah, opciones de velocidad para diferentes terrenos, y una gran variedad de opciones de personalización.

Especificaciones Técnicas

OVERLANDER 4



Largo	167 cm
Ancho	90 cm
Alto	140 cm
Peso total	187 Kg
Altura libre al suelo	23 cm
Diámetro de rueda	54 cm
Radio de giro	3,2 metros



Overlander Mini: Para Pequeños Aventureros

1 Diseño Compacto

Perfecta para niños desde los 7 años o adultos de talla baja, con dimensiones más pequeñas que los modelos estándar.

2 Seguridad Primero

Velocidad limitada a 6 km/h para niños menores de 14 años y opción de parada remota para mayor tranquilidad de los padres.

3 Versatilidad

Disponible en versiones de 2 y 4 ruedas motrices, con sistema de suspensión independiente en cada rueda.

4 Comodidad y Ajustabilidad

Asiento y respaldo ajustables, con opción de plegado para facilitar el transporte.

Características Estándar



Seguridad

Cinturón de seguridad y llave de seguridad incluidos en todos los modelos.



Iluminación

Luces LED frontales y traseras, más intermitentes para mayor visibilidad.



Rendimiento

Suspensión independiente en cada rueda y frenos de disco en las ruedas delanteras.



Comodidad


Asiento confort y barra protectora con apertura lateral (lado a elegir).



Accesorios Opcionales

Control Avanzado

Opciones de control con joystick o combinación de manillar y joystick para una experiencia de conducción personalizada.

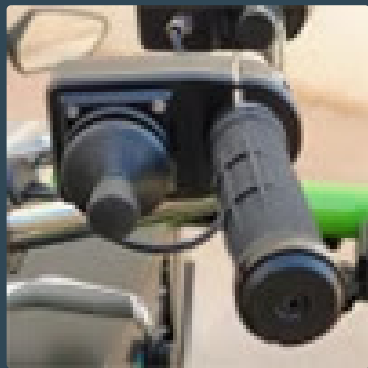

Mejoras de Rendimiento

Motores sumergibles, winch frontal y ruedas Monster para enfrentar los terrenos más desafiantes.




Confort y Seguridad

Asiento de fibra de carbono, asiento giratorio (manual o eléctrico), y arnés de seguridad de 4 o 5 puntos.



Personalización

Prolongación de chasis, luces adicionales y barra antivuelco superior para adaptarse a las necesidades específicas del usuario.

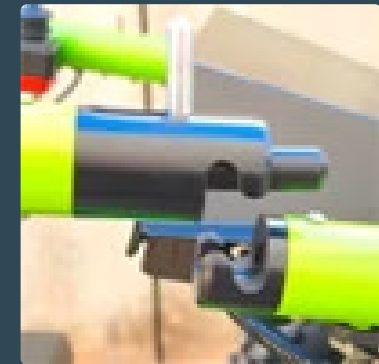

Dimensiones y Capacidades

1

Overlander 4Zx

Altura de la barra antivuelco: 1750 mm. Ajuste del asiento: 300 mm desde una posición fija.

2

Flatlander

Altura de la barra antivuelco: 1750 mm. Ajuste del asiento: 300 mm desde una posición fija..

3


Overlander Mini

Altura de la barra antivuelco: 1620 mm. Diseño compacto ideal para niños y adultos de talla baja.

4

Chasis Extra Largo

Opción de prolongación de chasis disponible para necesidades específicas de espacio o estabilidad.

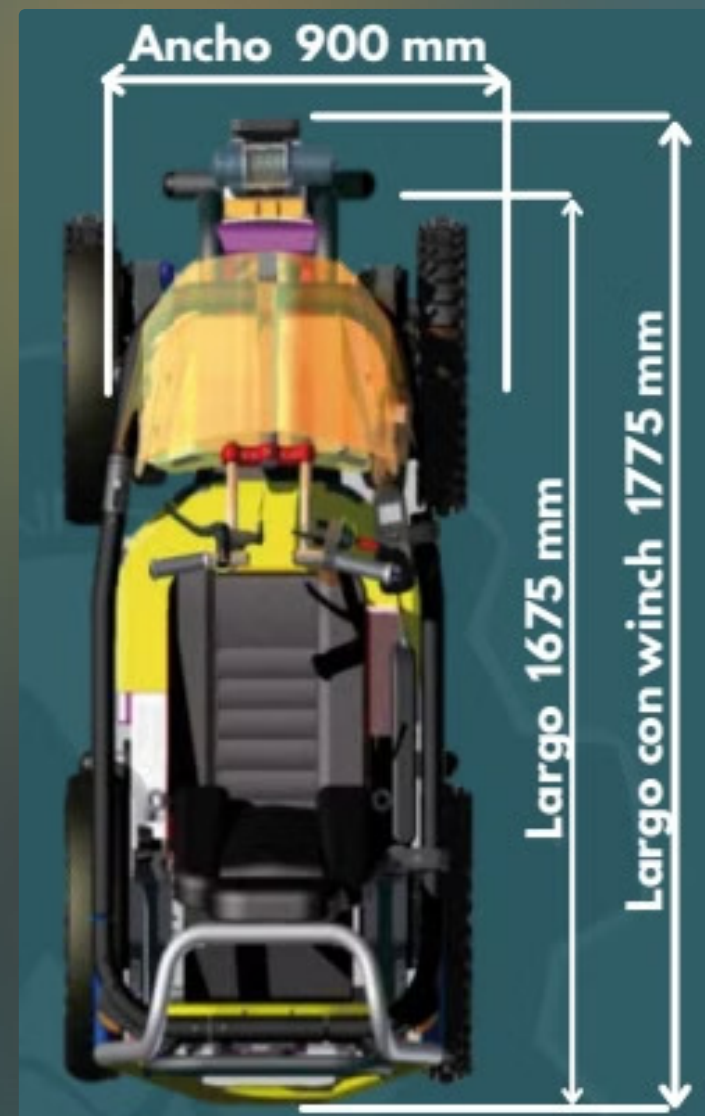



Datos de Inclinación

Modelo	Inclinación máx. subiendo	Inclinación máx. lateral	Inclinación máx. bajando
4Zx	35° (6.5 km/h)	20°	45°
Flatlander	35° (6.5 km/h)	20°	45°
Mini	20° (6.5 km/h)	20°	45°



Personalización y Garantía

1

Personalización Básica

Modificaciones sencillas como reposapiernas y reposacabezas disponibles a pedido.

2

Personalización Avanzada

Adaptaciones de alto rendimiento con materiales de alta tecnología como fibra de carbono o kevlar.

3

Colores Disponibles

Variedad de colores estándar para elegir y personalizar tu Overlander.

4

Garantía

Desde 1 año en componentes eléctricos hasta 5 años en el chasis, respaldando la calidad del producto.

GALERÍA





Distribuidor Exclusivo en España

1

Contacto

Teléfono: +34 664 338 005

2

Correo Electrónico

info@mylmobility.com

3

Sitio Web

www.mylmobility.com

4

Mantenimiento Recomendado

Anual para uso normal, cada 3 meses para uso intensivo.



NYL

Mobility Solutions