

move.

Pandhora®

MADE FOR YOUR HEALTH

EP3®



Propulsor eléctrico para silla de ruedas



**MYL**  
Mobility Solutions

# POR QUÉ ELEGIR PANDHORA EP3

## ADAPTABILIDAD UNIVERSAL

Gracias a sus sistema de anclaje universal se integra a la perfección con cualquier modelo de silla de ruedas manual del mercado.

## MÁXIMA AUTONOMÍA

Equipado con baterías de 36 V o 48 V que proporcionan autonomía máxima de hasta 50 km

## MÁXIMA POTENCIA

Los motores de 500W o 1000W permiten una navegación sin esfuerzo por rutas más largas o exigentes

## SEGURIDAD GARANTIZADA

Equipado con frenos electrohidráulicos de serie que aseguran una frenada segura y estable incluso en terrenos sueltos

## TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

Gracias al innovador controlador con IA, ofrece una experiencia de conducción tecnológicamente avanzada

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Pandhora®  
MADE FOR YOUR HEALTH

EP3®

### CONFIGURACIÓN DE SERIE

- Sistema de anclaje lateral o central (a elegir)
- Pantalla LCD a color multifunción con puerto USB integrado
- Elevación electrónica asistida
- 5 niveles de velocidad (velocidad máxima programable 25 km/h)
- Unidad de control integrada en la caja de baterías
- Sistema de freno regenerativo de carga de baterías
- Parámetros ajustables a través de Display
- Marcha atrás
- Freno de disco electrohidráulico
- Luces LED
- Guardabarros
- Gancho para equipaje

### OPCIONES

- Doble freno de disco electrohidráulico con fricción (standard en modelos PLUS)
- Bolsa de almacenamiento
- Bolsa de viaje para EP3 TRANSPORT
- Espejos retrovisores
- Controles Tetra Start&Stop
- Manillar plegable
- ESS - Sistema Start&Stop Automático
- Pack de Seguridad (standard en modelos PLUS)

IB - Freno inteligente  
CC - Control de crucero  
RBS Sistema de frenado regenerativo  
Modo ECO programable



PESO  
A partir de 7,7 kg



RUEDA  
8" - 10" - 10" fat - 12"  
14" - 14,5" y 16"



BATERÍA  
hasta 48V 16 Ah  
Autonomía 50 Km





|                   | MINI 8    | MINI 8 PLUS | MINI 10   | MINI 10 PLUS | CROSS     | CROSS PLUS | SMART     | SMART PLUS | STAND.    | STAND. PLUS | OFF-ROAD   | ENDURO     |
|-------------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|------------|
| Tamaño Rueda      | 8,5 "     | 8,5 "       | 10"       | 10"          | 10" FAT   | 10" FAT    | 12"       | 12"        | 14"       | 14"         | 14,5 " FAT | 16"        |
| Potencia          | 500 W     | 1000 W      | 500 W     | 1000 W       | 500 W     | 1000 W     | 500 W     | 1000 W     | 500 W     | 1000 W      | 1000 W     | 1000 W     |
| Pendiente max     | 10%       | 16%         | 10%       | 16%          | 10%       | 16%        | 10%       | 16%        | 10%       | 16%         | 16%        | 16%        |
| Batería           | 36 V 13Ah | 48 V 16Ah   | 36 V 13Ah | 48 V 16Ah    | 36 V 13Ah | 48 V 16Ah  | 36 V 13Ah | 48 V 16Ah  | 36 V 13Ah | 48 V 16Ah   | 48 V 16Ah  | 48 V 16 Ah |
| Autonomía         | 40 Km     | 50 Km       | 40 Km     | 50 Km        | 40 Km     | 50 Km      | 40 Km     | 50 Km      | 40 Km     | 50 Km       | 50 Km      | 50 Km      |
| Peso              | 7,7 Kg    | 7,7 Kg      | 7,8 Kg    | 7,8 Kg       | 11,4 Kg   | 11,4 Kg    | 8,5 Kg    | 8,5 Kg     | 9,8 Kg    | 9,8 Kg      | 11,8 Kg    | 12,4 Kg    |
| Peso max- usuario | 120 kg    | 120 kg      | 120 kg    | 120 kg       | 120 kg    | 120 kg     | 120 kg    | 120 kg     | 120 kg    | 120 kg      | 120 kg     | 120 kg     |
| Pack Seguridad    | Opción    | Serie       | Opción    | Serie        | Opción    | Serie      | Opción    | Serie      | Opción    | Serie       | Serie      | Serie      |
| Pack IA           | Opción    | Opción      | Opción    | Opción       | Opción    | Opción     | Opción    | Opción     | Opción    | Opción      | Opción     | Opción     |

## Características técnicas

- Sistema de anclaje lateral o central con sistema cónico
- Pantalla LCD a color multifunción con puerto USB integrado
- Elevación electrónica asistida
- 5 niveles de velocidad (velocidad máxima programable 25 km/h)
- Unidad de control integrada en la caja de baterías
- Sistema de freno regenerativo de carga de baterías
- Parámetros ajustables a través de Display
- Marcha atrás
- Control de Crucero
- Freno de disco electrohidráulico
- Luces LED
- Guardabarros
- Gancho para equipaje
- Manillar plegable opcional
- Disposición de comandos configurable
- Caballete con ruedas integrado en la unidad
- Pack de Seguridad: (de serie en modelo PLUS)

IB - Freno inteligente

CC - Control de crucero

RBS Sistema de frenado regenerativo

Modo ECO programable



RUEDA



PESO



POTENCIA



BATERÍA



VELOCIDAD



PENDI. MAX

### MINI 8

8,5"

7,7 Kg

500 W

36 V 13 Ah

25 Km/h

10%

### MINI 8 PLUS

8,5"

7,7 KG

1000 W

48 V 16 Ah

25 Km/h

16%



### SISTEMA ADAPTATIVO

Incluye el botón Cruise Control, para mantener la velocidad de crucero constante y el botón RBS (Regenerative Static Brake) que permite reducir la velocidad en bajadas y recarga la batería



### FÁCIL DE CONECTAR

#### Abrazaderas universales y Pasadores Cónicos

Garantizan un anclaje sencillo y con gran firmeza.



### SOPORTE INTEGRADO

EP3 permanece en una posición estable incluso cuando no está conectado a la silla de ruedas.



### ESS (Electronic Start & Stop)

Esta función permite que la unidad se frene al soltar el acelerador.



### FRENO REGENERATIVO

La batería se recarga a través de la activación del frenado.



### MÁXIMA ADHERENCIA

Configuración de engranajes que desplaza la carga a la rueda motriz, evitando el deslizamiento.

### Características técnicas

- Sistema de anclaje lateral o central con sistema cónico
- Pantalla LCD a color multifunción con puerto USB integrado
- Elevación electrónica asistida
- 5 niveles de velocidad (velocidad máxima programable 25 km/h)
- Unidad de control integrada en la caja de baterías
- Sistema de freno regenerativo de carga de baterías
- Parámetros ajustables a través de Display
- Marcha atrás
- Control de Crucero
- Freno de disco electrohidráulico
- Luces LED
- Guardabarros
- Gancho para equipaje
- Manillar plegable opcional
- Disposición de comandos configurable
- Caballete con ruedas integrado en la unidad
- Pack de Seguridad: (de serie en modelo PLUS)

IB - Freno inteligente

CC - Control de crucero

RBS Sistema de frenado regenerativo

Modo ECO programable



RUEDA



PESO



POTENCIA



BATERÍA



VELOCIDAD



PENDI. MAX

#### MINI 10

|     |        |       |            |         |     |
|-----|--------|-------|------------|---------|-----|
| 10" | 7,8 Kg | 500 W | 36 V 13 Ah | 25 Km/h | 10% |
|-----|--------|-------|------------|---------|-----|

#### MINI 10 PLUS

|     |        |        |            |         |     |
|-----|--------|--------|------------|---------|-----|
| 10" | 7,8 KG | 1000 W | 48 V 16 Ah | 25 Km/h | 16% |
|-----|--------|--------|------------|---------|-----|



#### SISTEMA ADAPTATIVO

Incluye el botón Cruise Control, para mantener la velocidad de crucero constante y el botón RBS (Regenerative Static Brake) que permite reducir la velocidad en bajadas y recarga la batería



#### FÁCIL DE CONECTAR

##### Abrazaderas universales y Pasadores Cónicos

Garantizan un anclaje sencillo y con gran firmeza.



#### SOPORTE INTEGRADO

EP3 permanece en una posición estable incluso cuando no está conectado a la silla de ruedas.



#### ESS (Electronic Start & Stop)

Esta función permite que la unidad se frene al soltar el acelerador.



#### FRENO REGENERATIVO

La batería se recarga a través de la activación del frenado.



#### MÁXIMA ADHERENCIA

Configuración de engranajes que desplaza la carga a la rueda motriz, evitando el deslizamiento.

## Características técnicas

- Sistema de anclaje lateral o central con sistema cónico
- Pantalla LCD a color multifunción con puerto USB integrado
- Elevación electrónica asistida
- 5 niveles de velocidad (velocidad máxima programable 25 km/h)
- Unidad de control integrada en la caja de baterías
- Sistema de freno regenerativo de carga de baterías
- Parámetros ajustables a través de Display
- Marcha atrás
- Control de Crucero
- Freno de disco electrohidráulico
- Luces LED
- Guardabarros
- Gancho para equipaje
- Manillar plegable opcional
- Disposición de comandos configurable
- Caballete con ruedas integrado en la unidad
- Pack de Seguridad: (de serie en modelo PLUS)

IB - Freno inteligente

CC - Control de crucero

RBS Sistema de frenado regenerativo

Modo ECO programable



RUEDA



PESO



POTENCIA



BATERÍA



VELOCIDAD



PENDI. MAX

### CROSS

|         |         |       |            |         |     |
|---------|---------|-------|------------|---------|-----|
| 10" FAT | 11,4 Kg | 500 W | 36 V 13 Ah | 25 Km/h | 10% |
|---------|---------|-------|------------|---------|-----|

### CROSS PLUS

|         |         |        |            |         |     |
|---------|---------|--------|------------|---------|-----|
| 10" FAT | 11,4 KG | 1000 W | 48 V 16 Ah | 25 Km/h | 16% |
|---------|---------|--------|------------|---------|-----|



#### SISTEMA ADAPTATIVO

Incluye el botón Cruise Control, para mantener la velocidad de cruce constante y el botón RBS (Regenerative Static Brake) que permite reducir la velocidad en bajadas y recarga la batería



#### FÁCIL DE CONECTAR

**Abrazaderas universales y Pasadores Cónicos**

Garantizan un anclaje sencillo y con gran firmeza.



#### SOPORTE INTEGRADO

EP3 permanece en una posición estable incluso cuando no está conectado a la silla de ruedas.



#### ESS (Electronic Start & Stop)

Esta función permite que la unidad se frene al soltar el acelerador.



#### FRENO REGENERATIVO

La batería se recarga a través de la activación del frenado.



#### MÁXIMA ADHERENCIA

Configuración de engranajes que desplaza la carga a la rueda motriz, evitando el deslizamiento.

## Características técnicas

- Sistema de anclaje lateral o central con sistema cónico
- Pantalla LCD a color multifunción con puerto USB integrado
- Elevación electrónica asistida
- 5 niveles de velocidad (velocidad máxima programable 25 km/h)
- Unidad de control integrada en la caja de baterías
- Sistema de freno regenerativo de carga de baterías
- Parámetros ajustables a través de Display
- Marcha atrás
- Control de Crucero
- Freno de disco electrohidráulico
- Luces LED
- Guardabarros
- Gancho para equipaje
- Manillar plegable opcional
- Disposición de comandos configurable
- Caballete con ruedas integrado en la unidad
- Pack de Seguridad: (de serie en modelo PLUS)

IB - Freno inteligente

CC - Control de crucero

RBS Sistema de frenado regenerativo

Modo ECO programable



RUEDA



PESO



POTENCIA



BATERÍA



VELOCIDAD



PENDI. MAX

### SMART

|     |        |       |            |         |     |
|-----|--------|-------|------------|---------|-----|
| 12" | 8,5 Kg | 500 W | 36 V 13 Ah | 25 Km/h | 10% |
|-----|--------|-------|------------|---------|-----|

### SMART PLUS

|     |        |        |            |         |     |
|-----|--------|--------|------------|---------|-----|
| 12" | 8,5 KG | 1000 W | 48 V 16 Ah | 25 Km/h | 16% |
|-----|--------|--------|------------|---------|-----|



#### FÁCIL DE CONECTAR

##### Abrazaderas universales y Pasadores Cónicos

Garantizan un anclaje sencillo y con gran firmeza.



#### SOPORTE INTEGRADO

EP3 permanece en una posición estable incluso cuando no está conectado a la silla de ruedas.



#### ESS (Electronic Start & Stop)

Esta función permite que la unidad se frene al soltar el acelerador.



#### FRENO REGENERATIVO

La batería se recarga a través de la activación del frenado.



#### MÁXIMA ADHERENCIA

Configuración de engranajes que desplaza la carga a la rueda motriz, evitando el deslizamiento.



#### SISTEMA ADAPTATIVO

Incluye el botón Cruise Control, para mantener la velocidad de cruce constante y el botón RBS (Regenerative Static Brake) que permite reducir la velocidad en bajadas y recarga la batería.



## Características técnicas

- Sistema de anclaje lateral o central con sistema cónico
- Pantalla LCD a color multifunción con puerto USB integrado
- Elevación electrónica asistida
- 5 niveles de velocidad (velocidad máxima programable 25 km/h)
- Unidad de control integrada en la caja de baterías
- Sistema de freno regenerativo de carga de baterías
- Parámetros ajustables a través de Display
- Marcha atrás
- Control de Crucero
- Freno de disco electrohidráulico
- Luces LED
- Guardabarros
- Gancho para equipaje
- Manillar plegable opcional
- Disposición de comandos configurable
- Caballete con ruedas integrado en la unidad
- Pack de Seguridad: (de serie en modelo PLUS)

IB - Freno inteligente

CC - Control de crucero

RBS Sistema de frenado regenerativo

Modo ECO programable



RUEDA



PESO



POTENCIA



BATERÍA



VELOCIDAD



PENDI. MAX

### STANDARD

|     |        |       |            |         |     |
|-----|--------|-------|------------|---------|-----|
| 14" | 9,8 Kg | 500 W | 36 V 13 Ah | 25 Km/h | 10% |
|-----|--------|-------|------------|---------|-----|

### STANDARD PLUS

|     |        |        |            |         |     |
|-----|--------|--------|------------|---------|-----|
| 14" | 9,8 KG | 1000 W | 48 V 16 Ah | 25 Km/h | 16% |
|-----|--------|--------|------------|---------|-----|



#### FÁCIL DE CONECTAR

##### Abrazaderas universales y Pasadores Cónicos

Garantizan un anclaje sencillo y con gran firmeza.



#### SOPORTE INTEGRADO

EP3 permanece en una posición estable incluso cuando no está conectado a la silla de ruedas.



#### ESS (Electronic Start & Stop)

Esta función permite que la unidad se frene al soltar el acelerador.



#### FRENO REGENERATIVO

La batería se recarga a través de la activación del frenado.



#### MÁXIMA ADHERENCIA

Configuración de engranajes que desplaza la carga a la rueda motriz, evitando el deslizamiento.



#### SISTEMA ADAPTATIVO

Incluye el botón Cruise Control, para mantener la velocidad de crucero constante y el botón RBS (Regenerative Static Brake) que permite reducir la velocidad en bajadas y recarga la batería.



### Características técnicas

- Sistema de anclaje lateral o central con sistema cónico
- Pantalla LCD a color multifunción con puerto USB integrado
- Elevación electrónica asistida
- 5 niveles de velocidad (velocidad máxima programable 25 km/h)
- Unidad de control integrada en la caja de baterías
- Sistema de freno regenerativo de carga de baterías
- Parámetros ajustables a través de Display
- Marcha atrás
- Control de Crucero
- DOBLE Freno de disco electrohidráulico
- Luces LED
- Guardabarros
- Gancho para equipaje
- Manillar plegable opcional
- Disposición de comandos configurable
- Caballete con ruedas integrado en la unidad
- Pack de Seguridad:
  - IB - Freno inteligente
  - CC - Control de crucero
  - RBS Sistema de frenado regenerativo
  - Modo ECO programable



RUEDA

14,5"



PESO

12,4 Kg



POTENCIA

1000 W



BATERÍA

48 V 16 Ah



VELOCIDAD

30 Km/h



PENDI. MAX

16%

### OFF-ROAD



#### SISTEMA ADAPTATIVO

Incluye el botón Cruise Control, para mantener la velocidad de crucero constante y el botón RBS (Regenerative Static Brake) que permite reducir la velocidad en bajadas y recarga la batería



#### FÁCIL DE CONECTAR

##### Abrazaderas universales y Pasadores Cónicos

Garantizan un anclaje sencillo y con gran firmeza.



#### SOPORTE INTEGRADO

EP3 permanece en una posición estable incluso cuando no está conectado a la silla de ruedas.



#### ESS (Electronic Start & Stop)

Esta función permite que la unidad se frene al soltar el acelerador.



#### FRENO REGENERATIVO

La batería se recarga a través de la activación del frenado.



#### MÁXIMA ADHERENCIA

Configuración de engranajes que desplaza la carga a la rueda motriz, evitando el deslizamiento.



## Características técnicas

- Sistema de anclaje lateral o central con sistema cónico
- Pantalla LCD a color multifunción con puerto USB integrado
- Elevación electrónica asistida
- 5 niveles de velocidad (velocidad máxima programable 25 km/h)
- Unidad de control integrada en la caja de baterías
- Sistema de freno regenerativo de carga de baterías
- Parámetros ajustables a través de Display
- Marcha atrás
- Control de Crucero
- DOBLE Freno de disco electrohidráulico
- Luces LED
- Guardabarros
- Gancho para equipaje
- Manillar plegable opcional
- Disposición de comandos configurable
- Caballete con ruedas integrado en la unidad
- Pack de Seguridad:
  - IB - Freno inteligente
  - CC - Control de crucero
  - RBS Sistema de frenado regenerativo
  - Modo ECO programable



RUEDA



PESO



POTENCIA



BATERÍA



VELOCIDAD



PENDI. MAX

### ENDURO

16"

11,8 Kg

1000 W

48 V 16 Ah

30 Km/h

16%



### FÁCIL DE CONECTAR

#### Abrazaderas universales y Pasadores Cónicos

Garantizan un anclaje sencillo y con gran firmeza.



### SOPORTE INTEGRADO

EP3 permanece en una posición estable incluso cuando no está conectado a la silla de ruedas.



### ESS (Electronic Start & Stop)

Esta función permite que la unidad se frene al soltar el acelerador.



### FRENO REGENERATIVO

La batería se recarga a través de la activación del frenado.



### MÁXIMA ADHERENCIA


Configuración de engranajes que desplaza la carga a la rueda motriz, evitando el deslizamiento.



### SISTEMA ADAPTATIVO

Incluye el botón Cruise Control, para mantener la velocidad de crucero constante y el botón RBS (Regenerative Static Brake) que permite reducir la velocidad en bajadas y recarga la batería.



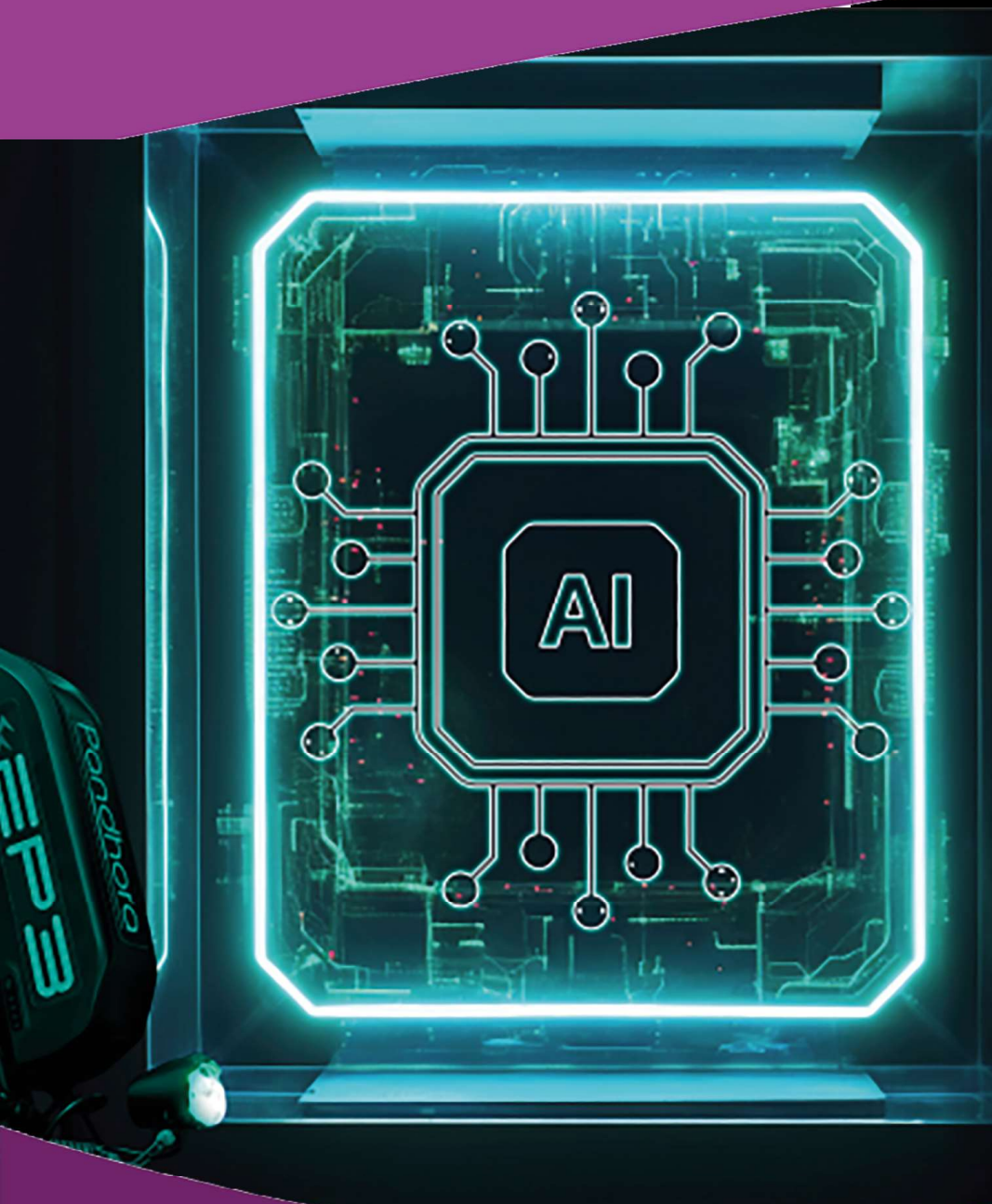

## NUEVO controlador con IA



### ESS 2.0 - Electronic Start & Stop 2.0

Controla el movimiento de la unidad, manteniendo la velocidad cuesta abajo con el acelerador parcialmente girado y deteniendo la handbike al soltar el acelerador.



### DCC Dynamic Cruise Control

Mantiene una velocidad constante en cada pendiente, frena automáticamente y recarga la batería durante la frenada.



### PEB Progressive Electronic Brake

Frenada totalmente electrónica, progresiva y controlada; evitando paradas bruscas.



### DAS Dynamic Anti-Slip

Previene el deslizamiento regulando la potencia del motor para garantizar una tracción segura en cualquier superficie.



### ECO Energy Consumption Optimizer

Sistema avanzado de optimización energética. Gestiona la energía con 5 niveles personalizables para una máxima eficiencia, ampliando la autonomía hasta un 40% más sin desperdiciar energía.



### DDR Dynamic Directional Radar

Detecta obstáculos en el sentido de la marcha, frena progresivamente para mantener una distancia de seguridad y reanuda la marcha con suavidad al entrar en un espacio abierto.



### Control personalizado

Permite personalizar la velocidad máxima y otros parámetros de funcionamiento, garantizando seguridad y control gracias a la protección con contraseña.

## Configuración del Manillar

### EP3 STANDARD




### EP3 OFF-ROAD



### EP3 PLUS



### EP3 ENDURO

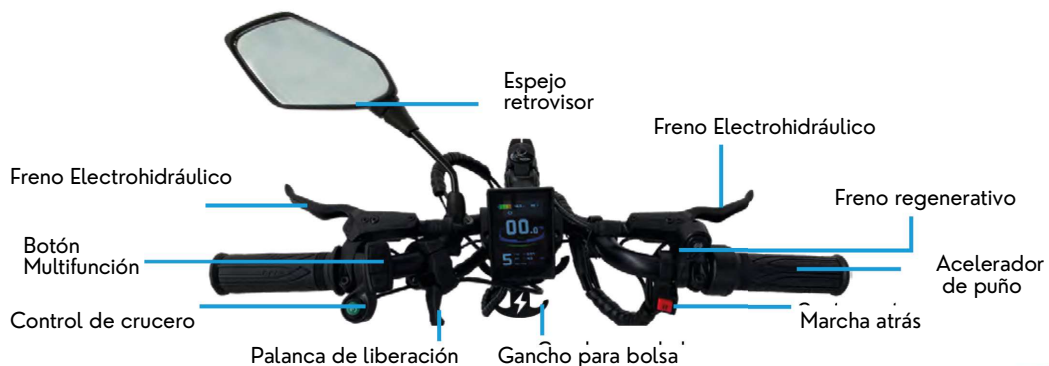

## Accesorios y Opciones

### MANILLAR TETRA START & STOP



### PERSONALIZACIÓN MANILLAR STANDARD



Manillar Plegable



Acelerador de puño



Acelerador de pulgar vertical



Acelerador de pulgar horizontal



Palanca de elevación-Confort

### SISTEMA DE ANCLAJE



Sistema de anclaje central



Sistema de anclaje lateral

### OTRAS OPCIONES Y ACCESORIOS




Batería 288Wh para viajar en avión



Bolsa Central



Protector de conexiones

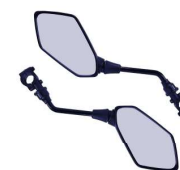

Espejos retrovisores

# FREE



**ML**  
Mobility Solutions

**move.**

**move.**



**[www.mylmobility.com](http://www.mylmobility.com)**

 + 34 966 972 725

 [info@mylmobility.com](mailto:info@mylmobility.com)