

move.



TERRAINHOPPER

Overlander 4zx

La Máxima Movilidad Todoterreno



MYL
Mobility Solutions

POR QUÉ ELEGIR OVERLANDER

INNOVADOR TODOTERRENO

Overlander ofrece la máxima movilidad todoterreno, capaz de afrontar terrenos difíciles y explorar lugares inalcanzables para otros dispositivos, facilitando la aventura y la independencia, especialmente para personas con movilidad reducida.

TODOTERRENO POTENTE

Capaz de subir pendientes de hasta 35° con neumáticos de 20" o 22", motor de hasta 1500W y 2 baterías de Litio de 24v 45AH

DISEÑO COMPACTO Y ADAPTABLE

El modelo Mini es especialmente diseñado para niños y adultos de talla baja, con dimensiones ajustadas y opciones de elevación del chasis para mayor estabilidad.

ALTA RESISTENCIA

Soporta hasta 190 kg, con suspensión independiente en cada rueda y frenos de disco para mayor seguridad.

GARANTÍA Y RESPALDO

MYL somos distribuidores exclusivos en España, lo que garantiza respaldo, mantenimiento y atención especializada.

SEGURIDAD Y CONFORT

Incluye cinturones, luces LED, barras antivuelco y asientos ajustables además de opciones de personalización, asegurando comodidad y protección en todas las condiciones.

OVERLANDER 4zx



La Máxima Movilidad Todoterreno

La libertad de explorar terrenos hasta ahora inalcanzables es de un valor incalculable.

Para las personas con movilidad reducida, Overlander ofrece la oportunidad de aventurarse donde ninguna otra silla de ruedas ha estado antes.

Ya sea para senderismo, trekking, pesca o agricultura, Overlander tiene la fuerza y la estabilidad para hacer frente a casi cualquier terreno con facilidad.

Descubre cómo esta innovadora silla de ruedas todoterreno está cambiando vidas y abriendo nuevas posibilidades para la exploración y la independencia.

OVERLANDER MINI



CARACTERÍSTICAS GENERALES



Overlander 4zx

CONFIGURACIÓN DE SERIE

Cinturón de seguridad	Luz frontal y trasera de LED Intermitentes
Cubiertas lisas o de tacos a elegir	Freno de disco en las ruedas delanteras
Llave de seguridad	Barra protectora con apertura lateral (Lado a elegir)
4 x motores Overlander Mini	Asiento confort
4 x motores Overlander 4ZX	2 Baterías de Litio de 24v 45Ah
Manillar de dirección con gatillo	Suspensión independiente en cada rueda

COLORES DISPONIBLES





TERRAINHOPPER

Overlander 4zx

Control con joystick	OPCIONES	Barra antivuelco superior
Control con manillar y joystick	Winch frontal	Luces adicionales
Motores sumergibles	Asiento giratorio manual o eléctrico	Barra protectora con apertura en ambos lados
Prolongación de chasis más largo a 182,5 cm	Arnés de seguridad de 4 o 5 puntos	Plataforma de posapiés ajustable
Pantalla protectora para el aire	Ruedas Monster	Asiento de fibra de carbono



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PESO
TOTAL

187 KG



POTENCIA

1500 W



BATERÍA
(2)

24V 45AH
AMPLIABLE A
24V 90AH



VELOCIDAD

6.5 KM/H
9.6 KM/H
13 KM/H



PEND.MÁX
SUBIDA

35°




PEND.MÁX
BAJADA

45°

cm

LARGO

167 CM

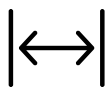

ANCHO

90 CM



ALTO

140



PESO MÁX
USUARIO

190 KG



RADIO DE
GIRO

3.2 M



INCL.MÁX
LATERAL

20°




DIÁMETRO
DE RUEDA

54 CM



ALT. LIBRE
AL SUELO

23 CM

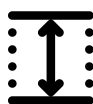


ALT.DEL
ASIENTO AL
SUELO

70 CM




LARGO
PLATF
POSAPIÉS

70 CM

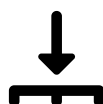

ALT.DE
ASIENTO A
PLATF
POSAPIÉS

35 CM

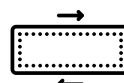

ANCHO DE
ASIENTO

42 CM



PROF.DE
ASIENTO

43 CM



TERRAINHOPPER

Overlander 4zx



2 SISTEMAS ELÉCTRICOS SEPARADOS

1 alimenta los motores delanteros y el 2º los traseros. Si uno de los sistemas falla, puede conducir con tracción a 2 ruedas.




MAYOR TORQUE

El 4ZX tiene los beneficios adicionales de un mayor torque y capacidad de peso del usuario, con el beneficio añadido de protección de motor incorporada.



AUTÉNTICA TRACCIÓN A LAS 4 RUEDAS

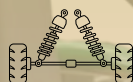

SISTEMA DE SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE EN LAS 4 RUEDAS



MOTORES SUMERGIBLES



BARRA ANTIVUELVO LATERAL

Barra antivuelco lateral que se eleva para facilitar el acceso y ofrece protección adicional



ASIENTO Y RESPALDO AJUSTABLES

La Silla se pliega para facilitar el transporte



DIRECCIÓN AJUSTABLE

Para adaptarse a sus necesidades personales






BATERÍAS DE LITIO



RUEDAS MONSTER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONCEPTO	MEDIDA
Ancho Estándar 'W'	850 mm
Largo Estándar A	1675 mm
Largo Estándar con cabrestante	1775 mm
Chasis extendido A	1825 mm
Chasis extendido con cabrestante	1925 mm
Altura asiento plegable (C)	1100 mm
Altura parte fija del arco antivuelco (E)	1020 mm (ajustable a 950 mm)
Arco antivuelco superior (adulto X)	1750 mm
Arco antivuelco superior (niño Y)	1620 mm
Altura libre al suelo	250 mm
Ajuste del asiento (SA)	300 mm (desde posición fija)

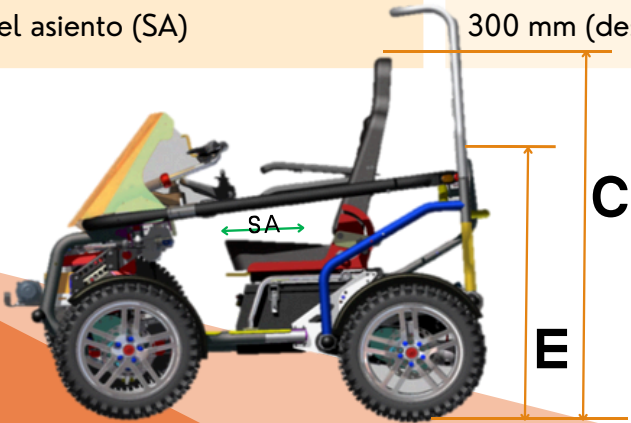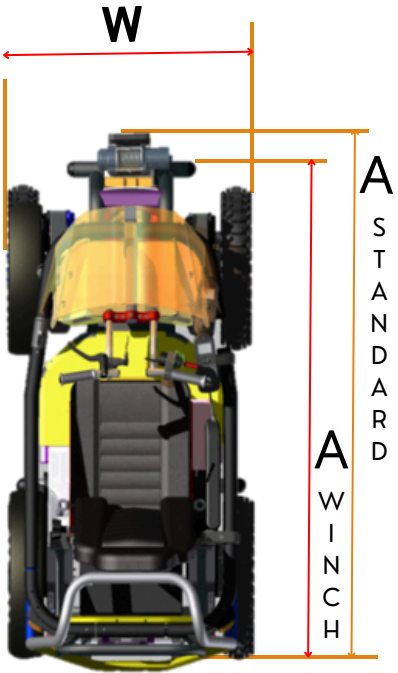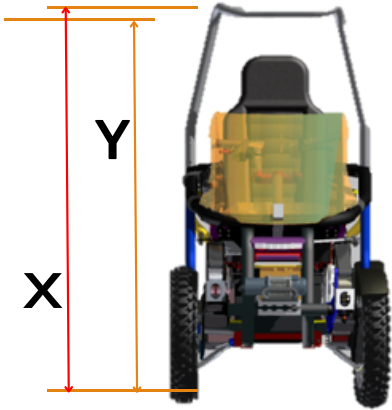

MOTORES
4 X 750 vatios
Hasta 3000 vatios de potencia máxima pico

move.



TERRAINHOPPER

Overlander 4zx



MYL
Mobility Solutions

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	OVERLANDER MINI	OVERLANDER 4ZX
OPCIONES DE VELOCIDAD	MAX 6 KM/H MAX 8 KM/H MAX 10 KM/H	MAX 6 KM/H MAX 8 KM/H MAX 10 KM/H
INCLINACIÓN MÁXIMA	6 KM/H---20° 8 KM/H---20° 10 KM/H---20°	6 KM/H---20° 8 KM/H---20° 10 KM/H---20°
PENDIENTE MÁX DE SUBIDA	6 KM/H---20° 8 KM/H---15° 10 KM/H---12°	6 KM/H---35° 8 KM/H---25° 10 KM/H---15°
PENDIENTE MÁX DE BAJADA	45°	45°
RADIO DE GIRO	3 METROS	3.2 METROS
PESO MÁXIMO DEL USUARIO	90 KG	190 KG



CAPACIDAD DE
ASCENSO



¡NCLINACIÓN
LATERAL

move.



TERRAINHOPPER

Overlander 4zx




MYL
Mobility Solutions

ACCESORIOS



Chaletto con anclaje en 5 puntos

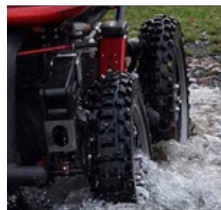


Tracción 4 ruedas



Chasis



Porta Bebidas

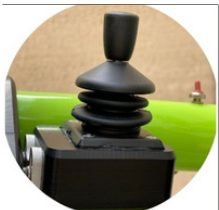

Joystick




Maletero trasero con cierre



Neumático extra de repuesto



Luces delanteras

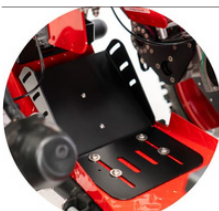

Reposapiés ajustable



Neumático Monster



Plataforma Trasera



Asiento giratorio



TERRAINHOPPER

Overlander 4zx




Winch



Manillar de dirección
con gatillo



Suspensión independiente
en c/rueda

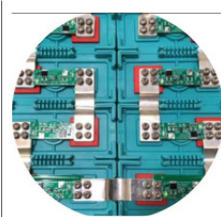

Batería de litio



Barra protectora
c/apertura lateral



Barra Antivuelco



Intermitentes



Asiento de carbono



Asiento reclinable
Corbeau Sportsman



Parabrisas



Asiento de carbono
Tillett W1i



Asiento de carbono
Tillett B6 F

Overlander MINI




move.

Overlander 4zx



move.

Distribuidor Autorizado



www.mylmobility.com



+ 34 966 942 725



info@mylmobility.com



[MylMobilitySolutions](#)



[MylMobilitySolutions](#)



[MylMobilitySolutions](#)