

ECO ASSIST

POTENCIA TU MOVILIDAD



REHASENSE

**NUEVO
PRODUCTO**



VER VIDEO



ECO ASSIST

COMPLEMENTO DE POTENCIA LIVIANO



COLOR
Negro

Horquilla delantera: gris oscuro



ECOASSIST es un accesorio de energía ligero de Rehasense, con una sólida estructura de aluminio y acero de alta resistencia, cuenta con un potente motor de 350 W y una eficiente batería de iones de litio. Aumente su comodidad y seguridad con controles ajustables, frenos confiables y un diseño elegante. ECO ASSIST se desplaza con agilidad por entornos urbanos, transformando cada trayecto en la ciudad en una experiencia placentera.

CARACTERÍSTICAS A SIMPLE VISTA

- Sistema de bloqueo manual
- Rango de ancho de ajuste de la silla de ruedas: 210-480 mm
- Rango de altura de ajuste de la abrazadera de la silla de ruedas: 260-420 mm
- Compatible con sillas de ruedas rígidas y plegables que cuenten con un soporte fijo, marco frontal o reposapiernas desmontable
- Se puede ajustar a casi cualquier tipo de silla de ruedas gracias a solución de sujeción especializada*
- Disco de freno de Ø160 mm
- Función de marcha
- Control de tracción
- Marcha atrás
- Accesorio: batería de mayor capacidad, 48 V, 11,6 Ah, 556,8 Wh
- Control de crucero (opcional)

*No recomendamos el uso de ECO ASSIST con fibra de carbono. Sillas de ruedas. Rehasense no asume ninguna responsabilidad por daños.

DATOS TÉCNICOS


Peso total	Peso de transporte	Peso máx. usuario	Tamaño rueda	Fuerza motor	Esfuerzo máx. torsión	Modo de Velocidad	Velocidad máx.	Pendiente máx.	Batería estándar	Autonomía
15,5 kg	10 kg	110 kg	12"	350 W	39 Nm	hasta 3	20 km/h**	hasta 10%	Li-on, 48 V/ 5,8 Ah/ 278 Wh	hasta 30 km

** La velocidad de conducción debe ajustarse en todo momento a las normativas legales vigentes en el país.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Y ACCESORIOS



Sistema de doble freno: freno de disco mecánico (I) y freno eléctrico

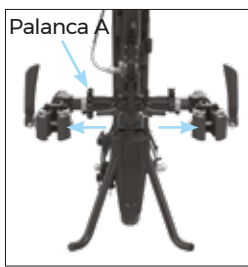

Ajuste de anchura: Utilice la palanca A para ajustar el ancho de la mordaza de forma fácil y rápida. Rango de ajuste: de 210 mm a 480 mm



Desconexión rápida para facilitar el transporte y el almacenamiento. Conectar o desconectar el cierre centralizado es un simple paso. Un cierre de seguridad garantiza una conexión segura



Soportes de piernas ajustables en altura para garantizar el mejor ajuste al marco (mín. 260 mm y máx. 420 mm)



Soportes de piernas opcionales con ruedas incorporadas o solución de reposapiés completa diseñada para usar con sillas de ruedas con soportes para las piernas extraíbles



Pesas concebidas para ofrecer una tracción óptima en condiciones exigentes. Estas pesas, con un peso total de aproximadamente 10 kg, pueden ajustarse a 7,5 kg o 5 kg según sus requerimientos



Bolsa (incluido soporte de soporte)



Su distribuidor de Rehasense



El sistema de gestión de calidad de Rehasense cumple con las normas ISO 9001 e ISO 13485, según lo confirmado por TÜV NORD. Los productos sanitarios de Rehasense cuentan con el marcado CE y cumplen los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 (MDR). Los productos sanitarios de Rehasense cuentan con el marcado UKCA y cumplen los requisitos de la normativa MHRA.

